



МАССАЖНАЯ
ПОДУШКА

FEDER

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

bodo

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор массажной подушки **Bodo Feder**. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя перед применением, чтобы понимать все функции. Строго соблюдайте требования техники безопасности. Сохраните и запомните эти инструкции!

Примечание: технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Все изображения, представленные в руководстве, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках, включая цвета, размеры и формы.

Требования техники безопасности

Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте все требования техники безопасности, чтобы убедиться в правильности эксплуатации массажера!

Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом перед использованием массажера в следующих случаях, если:

- ✓ страдаете хроническим заболеванием сердца, заболеванием кровеносных сосудов и повышенным кровяным давлением
- ✓ страдаете диабетом, острым варикозом, флебитом или тромбозом
- ✓ страдаете заболеванием позвоночника или имеются травмы позвоночника
- ✓ страдаете мышечной гипотонией
- ✓ недавно перенесли операцию, проходите курс лечения и испытываете дискомфорт
- ✓ беременны, недавно родили, а также во время менструации
- ✓ при онкологии
- ✓ страдаете остеопорозом и имеете слабые суставы
- ✓ имеются заболевания кожи или предрасположенность к ним
- ✓ есть протезы или другие имплантируемые медицинские детали в теле
- ✓ имеется заболевание воспалительного характера и высокая температура тела

Требования техники безопасности

Запрещено использовать массажер:

- ✓ в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или при употреблении седативных средств, вызывающих сонливость, подавленное состояние, повышающих или понижающих кровяное давление
- ✓ если установлены кардиостимуляторы или другие подобные медицинские устройства для поддержания жизни человека
- ✓ при туберкулезе, ревматизме, тендините, дисфункции суставов, эпилептикам, а также людям с нарушением свертываемости крови и аллергией
- ✓ в помещениях с повышенной влажностью (бассейн, ванная, душевая и др.), высокой температурой, в сильно запыленных местах и местах с высоким электромагнитным излучением
- ✓ если он поврежден, произошел механический или электронный сбой — в таких случаях незамедлительно обратитесь в сервисную службу

Запрещено:

- ✓ самостоятельно разбирать, пытаться отремонтировать или вмешиваться в устройство массажера
- ✓ пользоваться массажером, управляя транспортным средством, массажную подушку можно использовать только до начала движения или после окончания поездки
- ✓ пользоваться массажером на улице, в местах с плохой вентиляцией, под одеялом, подушкой или покрывалом во избежание перегрева

Требования техники безопасности

- ✓ пользоваться массажером на влажное тело
- ✓ стоять и прыгать на массажере, бросать, оказывать на него чрезмерные нагрузки, избегать попадания посторонних предметов в механические части массажера
- ✓ использовать медицинские или косметические кремы и лосьоны во время массажа
- ✓ использовать аэрозоли и спреи рядом с работающей подушкой
- ✓ использовать массажер с неубранными длинными волосами, с заколками и украшениями для волос, одежды и другими предметами, которые могут нанести травму во время массажа
- ✓ использовать другое терапевтическое оборудование совместно с этим массажером
- ✓ засыпать и спать с массажером
- ✓ пользоваться неисправным или поврежденным шнуром питания, вилок или розеткой
- ✓ извлекать шнур питания из розетки во время сеанса массажа
- ✓ пользоваться массажером при грозе и молнии

Требования техники безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дополнительная информация и предостережения по безопасности

Массажер не предназначен для медицинского, коммерческого и общественного использования.

Массажер предназначен только для взрослых.

Использование массажера лицам с психическими расстройствами и инвалидам допускается только под строгим контролем опытного инструктора, ответственного за безопасность.

Массажер снабжен функцией прогрева, поэтому особое внимание при его работе следует уделять людям с повышенным или наоборот, с полным отсутствием чувствительности тела.

Если во время массажа вы почувствуете недомогание, головокружение или тошноту, немедленно прекратите использование массажера и проконсультируйтесь с врачом.

Во избежание дискомфорта, не используйте массажер сразу после еды.

Избегайте попадания конечностей, волос и одежды в пространство между механическими частями массажера во время его работы.

Используйте адаптеры питания только из комплекта поставки.

Не перемещайте массажер при помощи шнура питания или используя его как ручку.

Используйте розетку только с заземлением.

Требования техники безопасности


Если массажер не используется, выключите питание и извлеките вилку из розетки.

Извлекая вилку из розетки, держитесь за вилку, а не за шнур питания. Кроме того, не включайте и не отключайте шнур питания мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.

Если из массажера слышен необычный звук или шум, выключите его и немедленно отключите питание. Обратитесь в сервисную службу.

Рекомендуемое время использования массажера — 20 минут в день.

Описание

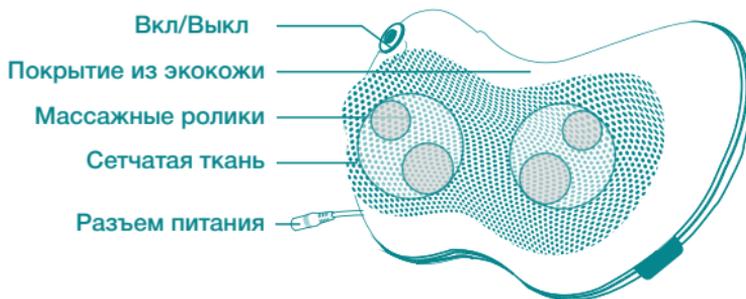

Адаптер питания
для электросети 220В



Адаптер питания
для автомобиля 12В



Управление

- ✓ Подсоедините штекер адаптера питания к разъему питания массажной подушки. Вставьте вилку шнура адаптера питания в соответствующую розетку.
- ✓ Коротко нажмите «Вкл/Выкл», начнется разминающий массаж с функцией прогрева длительностью 20 минут.
- ✓ Нажмите «Вкл/Выкл» еще раз, продолжится разминающий массаж без функции прогрева.
- ✓ Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд, чтобы выключить массажер и все его функции.
- ✓ Извлеките вилку шнура адаптера питания из розетки.

Области применения



шея



спина



голени



ладони



бедро

Уход и хранение

Перед чисткой массажера убедитесь, что он выключен, а вилка шнура адаптера питания отсоединена от розетки.

Чистите только внешнюю часть подушки мягкой сухой тканью, аккуратно протирайте ей массажер, провода и корпус адаптера питания.

Внимание!

При чистке запрещено использовать любые моющие и агрессивные средства, такие как бензин, растворители или спирт. Данные вещества могут изменить цвет поверхности массажера и повредить его. Никогда не погружайте массажер в воду и не допускайте попадания воды в устройство.

Рекомендуется хранить массажер в оригинальной упаковке, в недоступном для детей, в чистом, сухом, прохладном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.

Перед каждым использованием массажера, убедитесь, что:

- ✓ отсутствуют посторонние запахи (например, жженой резины или проводки)
- ✓ не нагревается шнур питания
- ✓ отсутствуют другие нетипичные признаки

Устранение неисправностей

В данном разделе описаны самые распространенные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при использовании массажера. Если вы не сможете устранить проблему, используя нижеизложенную информацию, или у вас имеются проблемы, которые здесь не описаны, обратитесь в сервисную службу.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Массажер не работает	Вилка шнура адаптера питания не вставлена в розетку	Вставьте вилку шнура адаптера питания в розетку, проверьте все соединения
	Штекер шнура питания не подсоединен к разъему питания	
	Закончилось время сеанса массажа	Включите массажер и запустите новый сеанс массажа
Массажер очень горячий	Слишком долгая непрерывная работа массажера	Выключите питание и дайте массажеру остыть не менее 1 часа перед следующим использованием

Спецификация

Наименование продукта: массажная подушка

Модель: Feder

Напряжение: AC100-240V/50-60Hz

Мощность: 30W

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажера «Vodo» уполномоченным дилером в течение 1 года со дня продажи изделия. Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых гарантий и действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающими факт совершения покупки.

Гарантия действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие. На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии.

Гарантия не распространяется на повреждения и износ ткани.

Гарантия распространяется только на непосредственного покупателя массажера и прекращается при смене владельца.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, дилер оставляет за собой право заменить массажер на новый, адекватный по стоимости неисправному массажеру на дату приобретения.

Гарантия распространяется на массажер при соблюдении правил эксплуатации. Любые попытки изменить или разобрать конструкцию приведут к снятию продукта с гарантии.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- небрежного хранения или транспортировки
- нарушения правил эксплуатации
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ
- ремонтных работ, производимых не уполномоченным сервисным центром
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми
- использования изделия не по назначению
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)

Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляется за счет клиента.

Дата покупки: _____

Наименование товара: _____

Компания-продавец: _____

Телефон: _____

ФИО клиента: _____

М.П.

Подпись _____

С правилами эксплуатации, противопоказаниями и рекомендациями ознакомлен. Претензий не имею.

_____ / _____

(подпись)

(расшифровка)