



МАССАЖЕР
ДЛЯ НОГ

Dessan

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор массажера для ног Dessan. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя перед применением массажера, чтобы понимать все его функции. Строго соблюдайте требования техники безопасности. Сохраните и запомните эти инструкции!

Примечание:

технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Все изображения, представленные в руководстве, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках, включая цвета, размеры и формы.

Массажер — это механическое устройство бытового назначения для использования дома или в офисе, предназначенное для проведения аппаратного массажа различных участков тела (строго по предназначению конкретного массажера). Результатом работы массажера является так называемый роботизированный массаж, механизмы массажера, приводящиеся в движения различными способами, осуществляют контакт с телом человека путем массажа участков тела.

СОДЕРЖАНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	4
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	7
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	8
УХОД И ХРАНЕНИЕ	8
УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА	8
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	9
СПЕЦИФИКАЦИЯ	9
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	10

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте данное руководство, чтобы убедиться в правильности установки и эксплуатации изделия.

Инструкции по технике безопасности могут содержать разделы и символы «ВНИМАНИЕ», «ЗАПРЕЩЕНО» и «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», а также информационные символы. Это очень важные предостережения по безопасности, уделите им особое внимание!



ВНИМАНИЕ

Неправильная эксплуатация может стать причиной травм

Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом перед использованием массажера в следующих случаях:

- ✓ страдаете хроническим заболеванием сердца, заболеванием кровеносных сосудов и повышенным кровяным давлением
- ✓ страдаете диабетом, острым варикозом, флебитом или тромбозом
- ✓ недавно перенесли операцию, проходите курс лечения и испытываете дискомфорт
- ✓ беременны, недавно родили, а также во время менструации
- ✓ при онкологии
- ✓ страдаете остеопорозом и имеете слабые суставы
- ✓ имеются заболевания кожи или предрасположенность к ним
- ✓ есть протезы или другие имплантируемые медицинские детали в теле
- ✓ имеется заболевание воспалительного характера и высокая температура тела



ЗАПРЕЩЕНО

Неправильная эксплуатация может стать причиной травм и повреждения оборудования

Запрещено использовать массажер:

- ✓ в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или после употребления различных лекарств, которые могут вызывать сонливость, подавленное состояние, повысить или понизить кровяное давление
- ✓ если установлены кардиостимуляторы или другие подобные медицинские устройства для поддержания жизни человека
- ✓ при деформациях пальцев стопы, туберкулезе, ревматизме, дисфункции суставов, эпилептикам, а также людям с нарушением

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

свертываемости крови и аллергией

- ✓ в помещениях с повышенной влажностью (бассейн, ванная, душевая и др.), высокой температурой, в сильно запыленных местах и местах с высоким электромагнитным излучением
- ✓ если массажер поврежден, произошел механический или электронный сбой - в таких случаях незамедлительно обратитесь в сервисную службу

Запрещено:

- ✓ самостоятельно разбирать, пытаться отремонтировать или вмешиваться в устройство массажера
- ✓ пользоваться массажером в местах с плохой вентиляцией, под одеялом, подушкой или покрывалом во избежание перегрева
- ✓ пользоваться массажером с мокрыми ногами
- ✓ стоять и прыгать в массажере, оказывать на него чрезмерные нагрузки, избегайте попадания посторонних предметов в механические части массажера
- ✓ использовать медицинские или косметические кремы и лосьоны во время массажа
- ✓ использовать другое терапевтическое оборудование совместно с этим массажером
- ✓ засыпать и спать в массажере
- ✓ пользоваться неисправным или поврежденным шнуром питания, вилок или розеткой
- ✓ извлекать шнур питания из розетки во время сеанса массажа



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дополнительная информация и предостережения по безопасности

Перед использованием массажера, убедитесь, что рядом нет детей, домашних животных или посторонних предметов.

Пользуйтесь массажером, только если он установлен на ровной поверхности.

Во избежание дискомфорта, не используйте массажер сразу после еды.

Избегайте попадания конечностей, волос и одежды в пространство между механическими частями массажера во время его работы.

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Массажер снабжен функцией прогрева, поэтому особое внимание при его работе следует уделять людям с повышенной или отсутствующей чувствительностью тела.

Массажер предназначен только для взрослых. Использование массажера лицам с психическими расстройствами и инвалидам допускается только под строгим контролем опытного инструктора, ответственного за безопасность.

Если во время массажа вы почувствуете недомогание, головокружение или тошноту, немедленно прекратите использование массажера и проконсультируйтесь с врачом.


Используйте розетку только с заземлением.

Если массажер не используется, выключите питание и извлеките вилку из розетки.

Извлекая вилку из розетки, держитесь за вилку, а не за шнур питания. Кроме того, не включайте и не отключайте шнур питания мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.

Если из массажера слышен необычный звук или шум, выключите его и немедленно отключите питание. Обратитесь в сервисную службу.

Рекомендуемое время использования массажера — 15 минут в день. Начинайте всегда с самого легкого массажа, постепенно меняя его интенсивность.

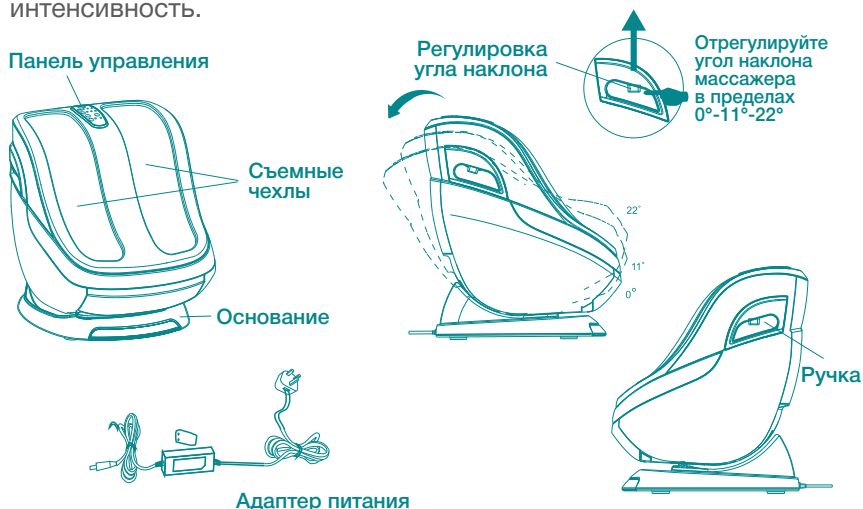

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Кнопка «Вкл/Выкл»

Включите массажер. По умолчанию запустится 1-й автоматический режим работы с средним уровнем интенсивности воздушно-компрессионного массажа, активируется функция прогрева для голеней и стоп. Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы выключить массажер.

Кнопка «Режим»

При включенном массажере, выберите и запустите 1 из 3 автоматических режимов работы массажера, сочетающие роликовый, разминающий, вибро- и аэромассажи.

Кнопка «Ручные программы»

Нажмите кнопку, чтобы запустить программу массажа с ручными настройками: «Аэро» — только воздушно-компрессионный массаж, «Роликовый» — только роликовый массаж с функцией вибрации.

Кнопка «Интенсивность» (аэромассажа)

Нажимайте на кнопку, чтобы выбрать 1 из 3 уровней интенсивности воздушно-компрессионного массажа: низкий, средний или высокий.

Кнопка «Прогрев»

Прогрев по умолчанию всегда включен. Нажмите на кнопку, чтобы активировать функцию прогрева для стоп и голеней вместе, по отдельности, или полностью выключить ее.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- ✓ Массажер хранят в упаковке производителя в сухих крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей.
- ✓ Условия хранения: в крытых помещениях при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 75%.
- ✓ Транспортировка массажера осуществляется в транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Перед чисткой массажера убедитесь, что он выключен, а вилка шнура питания отсоединена от розетки.

Для чистки используйте мягкую ткань, смочите ее в воде, хорошо отожмите и протрите пластиковые детали массажера. Затем протрите все сухой хлопчатобумажной тканью и дайте массажеру высохнуть. Панель управления и шнур питания чистите только сухой хлопчатобумажной тканью.

Съемные чехлы аккуратно стирайте вручную в теплой воде без использования автоматической стиральной машины. Не используйте фен, функцию сушки белья стиральной машины, не отжимайте и не гладьте съемные чехлы. Сушку производите только естественным путем.

Внимание! При чистке запрещено использовать любые агрессивные средства, такие как бензин, растворители или спирт. Данные вещества могут изменить цвет поверхности массажера и повредить его. Никогда не погружайте массажер в воду и не допускайте попадания воды в устройство.

Рекомендуется хранить массажер в чистом, прохладном и сухом, недоступном для детей месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА

Данный продукт нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами! Все электрические или электронные устройства, независимо от того, содержат они токсичные вещества или нет, должны быть утилизированы отдельно в специальном пункте утилизации согласно экологическим нормам и правилам вашего региона. За дополнительной информацией по правильной утилизации обращайтесь в органы местного самоуправления или к дилеру. За неправильную утилизацию данных отходов в соответствии с национальным законодательством может быть назначен штраф.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В данном разделе описаны самые распространенные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при использовании массажера. Если вы не сможете устранить проблему, используя нижеизложенную информацию, или у вас имеются проблемы, которые здесь не описаны, обратитесь в сервисную службу.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Массажер не работает	Вилка шнура адаптера питания не вставлена в розетку	Вставьте вилку шнура адаптера питания в розетку, проверьте все контакты
	Закончилось время сеанса массажа, которое составляет 15 минут и массажер автоматически выключился	Включите массажер и запустите новый сеанс массажа
	Слишком долгая непрерывная работа массажера (более 30 минут), сработала защита от перегрева	Выключите питание и дайте массажеру остыть не менее 1 часа перед следующим использованием
	Массажер перегружен	Не прилагайте чрезмерных нагрузок к механическим частям массажера при использовании, вставляйте ноги без усилий, не стойте и не прыгайте в массажере
Массажер очень горячий	Слишком долгая непрерывная работа массажера (более 30 минут)	Выключите питание и дайте массажеру остыть не менее 1 часа перед следующим использованием
Во время работы раздаются звуки и шумы из конструкции массажера	Это может быть звук мотора, компрессора, механических деталей массажера или звук трения массажного механизма о покрытие	Это нормальная работа массажера, не является неисправностью

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование продукта: массажер для ног

Модель: Dessan

Напряжение: AC100-240V/50-60Hz

Мощность: 60W

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажера «Bodo» дилером в течение 1 года со дня продажи изделия.

Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых гарантий и действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающих факт совершения покупки. Гарантия действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие. На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии. Гарантия не распространяется на повреждения и естественный износ.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, дилер оставляет за собой право заменить изделие на новое, адекватное по стоимости неисправному изделию на дату приобретения.

Гарантия прекращает свое действие, если ремонт изделия производился кем-либо, кроме дилера или уполномоченного агента.

В случае необходимости доставки изделия в сервисный центр, расходы по транспортировке оплачивает владелец изделия.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- небрежного хранения или транспортировки
- нарушения правил эксплуатации
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми
- использования изделия не по назначению
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних предметов

Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляется за счет клиента.

Дата покупки: _____

Наименование товара: _____

Компания-продавец: _____

Адрес продавца: _____

Телефон продавца: _____

ФИО клиента: _____

М.П.

Подпись _____

С правилами эксплуатации, противопоказаниями и рекомендациями ознакомлен.

Претензий не имею.

_____/_____
(подпись) (расшифровка)