



МАССАЖЕР
ДЛЯ НОГ

Fly

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

bodo

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор массажера для ног **Bodo Fly**. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя перед применением массажера, чтобы понимать все его функции. Строго соблюдайте требования техники безопасности. Сохраните и запомните эти инструкции!

Примечание:

технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Все изображения, представленные в руководстве, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках, включая цвета, размеры и формы.

СОДЕРЖАНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	4
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	7
УХОД И ХРАНЕНИЕ	8
УТИЛИЗАЦИЯ	8
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	9
СПЕЦИФИКАЦИЯ	9
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	10

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте все требования техники безопасности, чтобы убедиться в правильности эксплуатации изделия.



ВНИМАНИЕ

Неправильная эксплуатация может стать причиной травм

Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом перед использованием массажера в следующих случаях:

- ✓ страдаете хроническим заболеванием сердца, заболеванием кровеносных сосудов и повышенным кровяным давлением
- ✓ страдаете диабетом, острым варикозом, флебитом или тромбозом
- ✓ страдаете мышечной гипотонией
- ✓ беременны, недавно родили, а также во время менструаций
- ✓ при онкологии и большинстве видов доброкачественных опухолей
- ✓ страдаете остеопорозом и имеете слабые суставы
- ✓ имеются заболевания кожи или предрасположенность к ним
- ✓ есть протезы или другие имплантируемые медицинские детали в теле
- ✓ имеется заболевание воспалительного характера и высокая температура тела
- ✓ недавно перенесли операцию, проходите курс лечения и испытываете дискомфорт



ЗАПРЕЩЕНО

Неправильная эксплуатация может стать причиной травм и повреждения оборудования

Запрещено использовать массажер:

- ✓ в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или после употребления седативных средств, вызывающих сонливость, подавленное состояние, повышающих или понижающих кровяное давление
- ✓ если установлены кардиостимуляторы или другие подобные медицинские устройства для поддержания жизни человека
- ✓ при деформациях пальцев стопы, туберкулезе, ревматизме, тендините, дисфункции суставов, эпилептикам, а также людям с нарушением свертываемости крови и аллергией

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- ✓ в помещениях с повышенной влажностью (бассейн, ванная, душевая и др.), высокой температурой, в сильно запыленных местах и местах с высоким электромагнитным излучением
- ✓ если он поврежден, произошел механический или электронный сбой — в таких случаях незамедлительно обратитесь в сервисную службу

Запрещено:

- ✓ самостоятельно разбирать, пытаться отремонтировать или вмешиваться в устройство массажера
- ✓ пользоваться массажером на улице, в местах с плохой вентиляцией, под одеялом, подушкой или покрывалом во избежание перегрева
- ✓ пользоваться массажером на влажное тело
- ✓ стоять и прыгать на массажере, бросать, оказывать на него чрезмерные нагрузки
- ✓ использовать медицинские или косметические кремы и лосьоны во время массажа
- ✓ использовать аэрозоли и спреи рядом с работающим массажером
- ✓ использовать другое терапевтическое оборудование совместно с этим массажером
- ✓ засыпать и спать с массажером
- ✓ пользоваться неисправным или поврежденным шнуром питания, вилок или розеткой
- ✓ извлекать шнур питания из розетки во время сеанса массажа



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дополнительная информация и предостережения по безопасности

Массажер не предназначен для медицинского, коммерческого и общественного использования.

Массажер предназначен только для взрослых. Использование массажера лицам с психическими расстройствами и инвалидам допускается только под строгим контролем опытного инструктора, ответственного за безопасность.

Массажер снабжен функцией прогрева, поэтому особое внимание при его работе следует уделять людям с повышенным или наоборот, с полным отсутствием чувствительности тела.

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Если во время массажа вы почувствуете недомогание, головокружение или тошноту, немедленно прекратите использование массажера и проконсультируйтесь с врачом.

Во избежание дискомфорта, не используйте массажер сразу после еды.

Избегайте попадания посторонних предметов, волос и одежды в пространство между механическими частями массажера во время его работы.

Используйте адаптеры питания только из комплекта поставки.

Не перемещайте массажер при помощи шнура питания или используя его как ручку.

Если массажер не используется, выключите его и извлеките вилку адаптера питания из розетки.


Извлекая вилку из розетки, держитесь за вилку, а не за шнур питания. Кроме того, не включайте и не отключайте шнур питания мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.

Если из массажера слышен необычный звук или шум, выключите его и немедленно отключите питание. Обратитесь в сервисную службу.

Рекомендуемое время использования массажера — 15 минут в день. Начинайте всегда с самого легкого массажа, постепенно меняя его интенсивность. Перерыв между сеансами должен составлять не менее 30 минут.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

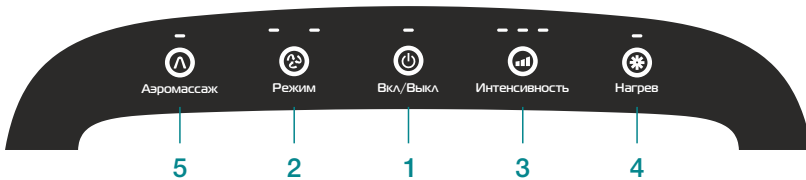

(1) Кнопка питания «Вкл/Выкл»

- подсоедините блок питания и коротко нажмите кнопку «Вкл/Выкл», по умолчанию запустится режим 1.
- режим 1 по умолчанию: Интенсивность – значение 1, Нагрев – включен, Роликовый массаж – включен, Аэромассаж – включен.
- нажмите кнопку «Вкл/Выкл» еще раз, чтобы выключить массажер.

(2) Кнопка «Режим»

- короткое нажатие изменяет режим массажа:
Режим 1 (по умолчанию): Интенсивность – значение 1, Нагрев – включен, Роликовый массаж – включен, Аэромассаж – включен.
Режим 2: увеличивает силу и время воздействия аэромассажа.

(3) Кнопка «Интенсивность»

- короткое нажатие изменяет интенсивность массажа. По умолчанию запускается массаж со значением интенсивности 1. Каждое последующее нажатие увеличивает интенсивность.

(4) Кнопка «Нагрев»

- нагрев по умолчанию всегда включен. Короткое нажатие выключает эту функцию.

(5) Кнопка «Аэромассаж»

- короткое нажатие останавливает роликовый массаж, продолжается только аэромассаж (световые индикаторы кнопки «Режим» отключены).

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Перед чисткой массажера убедитесь, что он выключен, а вилка шнура питания отсоединена от розетки.

Для чистки используйте мягкую ткань, смочите ее в воде, хорошо отожмите и протрите пластиковые детали массажера. Затем протрите все сухой хлопчатобумажной тканью и дайте массажеру высохнуть. Панель управления и шнур питания чистите только сухой хлопчатобумажной тканью.

Съемные чехлы аккуратно стирайте вручную в теплой воде без использования автоматической стиральной машины. Не используйте фен, функцию сушки белья стиральной машины, не отжимайте и не гладьте съемные чехлы. Сушку производите только естественным путем.

Внимание! При чистке запрещено использовать ярко окрашенные цветные ткани, металлические губки, а также любые моющие средства, включая агрессивные, такие как бензин, растворители или спирт. Данные материалы и вещества могут изменить цвет поверхности массажера и повредить его. Никогда не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания воды в устройство.

УТИЛИЗАЦИЯ

Данный продукт нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами! Все электрические или электронные устройства, независимо от того, содержат они токсичные вещества или нет, должны быть утилизированы отдельно в специальном пункте утилизации согласно экологическим нормам и правилам вашего региона. За дополнительной информацией по правильной утилизации обращайтесь в органы местного самоуправления или к дилеру. За неправильную утилизацию данных отходов в соответствии с национальным законодательством может быть назначен штраф.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В данном разделе описаны самые распространенные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при использовании массажера. Если вы не сможете устранить проблему, используя нижеизложенную информацию, или у вас имеются проблемы, которые здесь не описаны, обратитесь в сервисную службу.

1. Массажер не работает:

- нет питания - проверьте подключение массажера к электросети
- массажер не включен - проверьте, нажата ли кнопка «Вкл/Выкл»
- массажер перегрет - выключите питание, позвольте массажеру охладиться в течение 30 минут и запустите его снова нажатием кнопки «Вкл/Выкл»

2. Почувствовали слишком сильную интенсивность массажа

- убедитесь, что массажер установлен неподвижно на ровной поверхности
- Для лучшей адаптации к разным уровням интенсивности массажа, начинайте с низкого уровня, постепенно повышая его интенсивность.

! Устройство имеет защиту от перегрева. Оно автоматически остановит свою работу, когда температура станет слишком высокой. Пожалуйста, отсоедините кабель питания от электросети и позвольте охладиться устройству в течение 30 минут.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование продукта: массажер для ног

Модель: Fly

Напряжение: AC100-240V/50-60Hz

Мощность: 30W

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажера «Bodo» дилером в течение 1 года со дня продажи изделия.

Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых гарантий и действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающих факт совершения покупки. Гарантия действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие. На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии. Гарантия не распространяется на повреждения и естественный износ.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, дилер оставляет за собой право заменить изделие на новое, адекватное по стоимости неисправному изделию на дату приобретения.

Гарантия прекращает свое действие, если ремонт изделия производился кем-либо, кроме дилера или уполномоченного агента.

В случае необходимости доставки изделия в сервисный центр, расходы по транспортировке оплачивает владелец изделия.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- небрежного хранения или транспортировки
- нарушения правил эксплуатации
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми
- использования изделия не по назначению
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних предметов

Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляется за счет клиента.

Дата покупки: _____

Наименование товара: _____

Компания-продавец: _____

Адрес продавца: _____

Телефон продавца: _____

ФИО клиента: _____

М.П.

Подпись _____

С правилами эксплуатации, противопоказаниями и рекомендациями ознакомлен.

Претензий не имею.

_____/_____
(подпись) (расшифровка)