




МАССАЖНОЕ  
КРЕСЛО

# Ecto Sport

РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

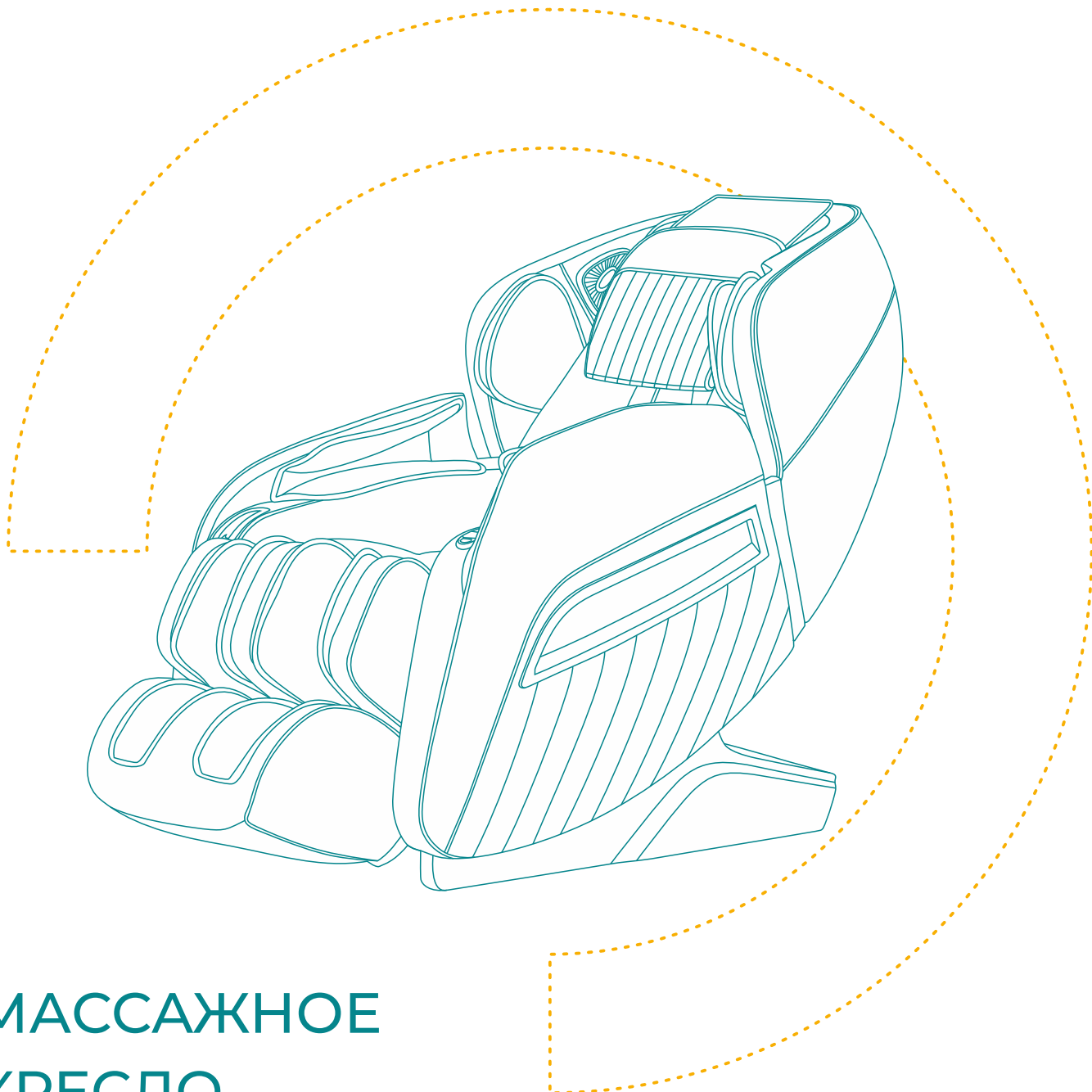

## Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор массажного кресла **Bodo Ecto Sport**, которое позаботится о вашем здоровье и теле. Пожалуйста, прочтите внимательно данное руководство пользователя перед применением, чтобы понимать все его функции. Строго соблюдайте требования техники безопасности. Сохраните и запомните эти инструкции!

Примечание: технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Все изображения, представленные в руководстве, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках, включая цвета, размеры и формы.

# СОДЕРЖАНИЕ

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ .....      | <b>6</b>  |
| УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ..... | <b>8</b>  |
| ОПИСАНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА .....           | <b>9</b>  |
| СБОРКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА .....             | <b>10</b> |
| ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА .....        | <b>11</b> |
| ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ .....            | <b>12</b> |
| ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ .....                     | <b>13</b> |
| ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ .....                  | <b>14</b> |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ .....                    | <b>18</b> |
| ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ .....                 | <b>19</b> |
| УХОД И ХРАНЕНИЕ .....                      | <b>20</b> |
| УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....            | <b>21</b> |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ .....                         | <b>21</b> |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .....                    | <b>22</b> |

Внимательно прочитайте данное руководство, чтобы убедиться в правильности установки и эксплуатации массажного кресла.

Инструкции по технике безопасности содержат разделы «ВНИМАНИЕ», «ЗАПРЕЩЕНО» и «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» - это очень важные предостережения по безопасности, уделите им особое внимание!



### ВНИМАНИЕ

Неправильная эксплуатация может стать причиной травм

- Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом перед использованием массажного кресла в следующих случаях:
  - ✓ установлены кардиостимуляторы или другие подобные устройства
  - ✓ есть протезы или другие имплантируемые медицинские детали в теле
  - ✓ страдаете хроническими заболеваниями сердца и повышенным кровяным давлением
  - ✓ страдаете диабетом, острым варикозом, флебитом или тромбозом
  - ✓ страдаете заболеваниями позвоночника или имеются травмы позвоночника
  - ✓ страдаете мышечной гипотонией, слабые мышцы, суставы или худощавое телосложение
  - ✓ при онкологии
  - ✓ при парестезии
  - ✓ при кинетозе и слабом вестибулярном аппарате
  - ✓ при тендовагините и остеопорозе
  - ✓ беременны, недавно родили, а также во время менструаций
  - ✓ имеются заболевания кожи или предрасположенность к ним
  - ✓ имеется заболевание воспалительного характера и высокая температура тела
  - ✓ недавно перенесли операцию, проходите курс лечения и испытываете дискомфорт
  - ✓ при любых почечных заболеваниях
- Использование массажного кресла лицам с психическими расстройствами и инвалидам допускается только под строгим контролем опытного инструктора, ответственного за безопасность.
- Если во время массажа вы почувствуете недомогание, головокружение или тошноту, немедленно прекратите использование массажного кресла и проконсультируйтесь с врачом.
- Не пытайтесь массировать колени и живот, будьте осторожны при массаже шеи и головы.
- Массажное кресло предназначено только для взрослых.
- Используйте розетку только с заземлением.
- Массажное кресло предназначено для некоммерческого использования в домашних условиях, а не для медицинского лечения.



### ЗАПРЕЩЕНО

Неправильная эксплуатация может стать причиной травм и повреждения оборудования

- Использовать массажное кресло в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или после употребления различных лекарств, которые могут вызывать сонливость, подавленное состояние, повысить или понизить кровяное давление.
- Использовать кресло с высокой температурой тела, а также если ваше тело влажное.
- Использовать кресло несколькими людьми одновременно.
- Засыпать и спать в массажном кресле.
- Сгибать и деформировать массажные ролики.
- Пользоваться неисправным или поврежденным шнуром питания, вилок или розеткой.
- Сильно сгибать, скручивать, сжимать, завязывать узлы в шнуре питания, ставить на шнур тяжелые предметы.
- Самостоятельно разбирать, пытаться отремонтировать или вмешиваться в устройство кресла.
- Сидеть, вставать, а также класть посторонние предметы на спинку, массажный блок для ног и подлокотники кресла.
- Вставать на кресло во время массажа.
- Перемещать работающее кресло.
- Использовать кресло, если перекрыты вентиляционные отверстия. Не допускайте попадания в них ворса от ковра, волос и других блокирующих вентиляционные отверстия предметов.
- Выключать питание и вытаскивать шнур питания во время массажа.
- Использовать кресло вне помещения и в местах прямого попадания солнечных лучей.
- Использовать кресло с заколками и украшениями для волос, браслетами, часами и другими предметами одежды, которые могут нанести травму во время массажа. В карманах вашей одежды не должно находиться твердых предметов.
- Использовать медицинские или косметические кремы во время массажа.
- Использовать массажное кресло на голое тело во избежание раздражения и ожога кожи. Обязательно производите массаж через тонкую ткань для достижения наилучшего эффекта.
- Использовать и хранить массажное кресло в помещениях с повышенной влажностью (бассейн, ванная, душевая и др.), в сильно запыленных местах, тесных помещениях, рядом с кондиционером или разогретыми предметами.
- Использовать массажное кресло, если оно повреждено, произошел механический или электронный сбой. В таких случаях незамедлительно обратитесь в сервисную службу.
- Держать массажное кресло работающим вхолостую в течение длительного времени.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дополнительная информация и предостережения по безопасности

- Максимальная грузоподъемность массажного кресла составляет 150 кг.
- Перед использованием массажного кресла убедитесь, что рядом нет детей, домашних животных или посторонних предметов.
- Пользуйтесь креслом, только если оно установлено на ровной поверхности.
- Перед тем, как сесть в кресло, проверьте, чтобы все массажные ролики находились в правильном положении.
- Рекомендуемое время использования массажного кресла — 20 минут в день. Начинать всегда с самого легкого массажа, постепенно меняя его интенсивность. Длительный массаж (более 5 минут) в одном положении или области тела может вызвать дискомфорт.
- Во избежание дискомфорта, не используйте массажное кресло сразу после еды.
- Избегайте попадания рук или ног между массажными роликами и в пространство между механическими частями кресла во время его работы.
- Если из массажного кресла слышен необычный звук или шум, выключите его и немедленно отключите питание. Обратитесь в сервисную службу.
- Не берите пульт управления влажными руками и не кладите на него посторонние предметы.
- Пульт управления следует держать в специальном кармане во избежание его возможной поломки и случайной активации.
- Не используйте другое терапевтическое оборудование совместно с этим массажным креслом.
- Не курите при использовании массажного кресла.
- Если массажное кресло не используется, выключите питание и извлеките вилку из розетки.
- Извлекая вилку из розетки, держитесь за вилку, а не за шнур питания. Кроме того, не включайте и не отключайте шнур питания мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Данное кресло не предназначено для медицинского использования.
- Не пользуйтесь креслом при грозе и молнии.
- Кресло снабжено функцией подогрева, поэтому особое внимание при работе с креслом следует уделять людям с повышенной чувствительностью к теплу.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ


Массажное кресло хранят в упаковке производителя в сухих крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей.

**Условия хранения:** в крытых помещениях при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 75%.

Транспортировка массажного кресла осуществляется в транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

Массажное кресло — это механическое устройство бытового назначения для использования дома или в офисе, предназначенное для проведения аппаратного массажа.

Результатом работы является так называемый роботизированный массаж. Устройство совмещает в себе кресло для сидения и механизмы, приводящиеся в движения различными способами и осуществляющие контакт с телом человека путем массирования участков тела.

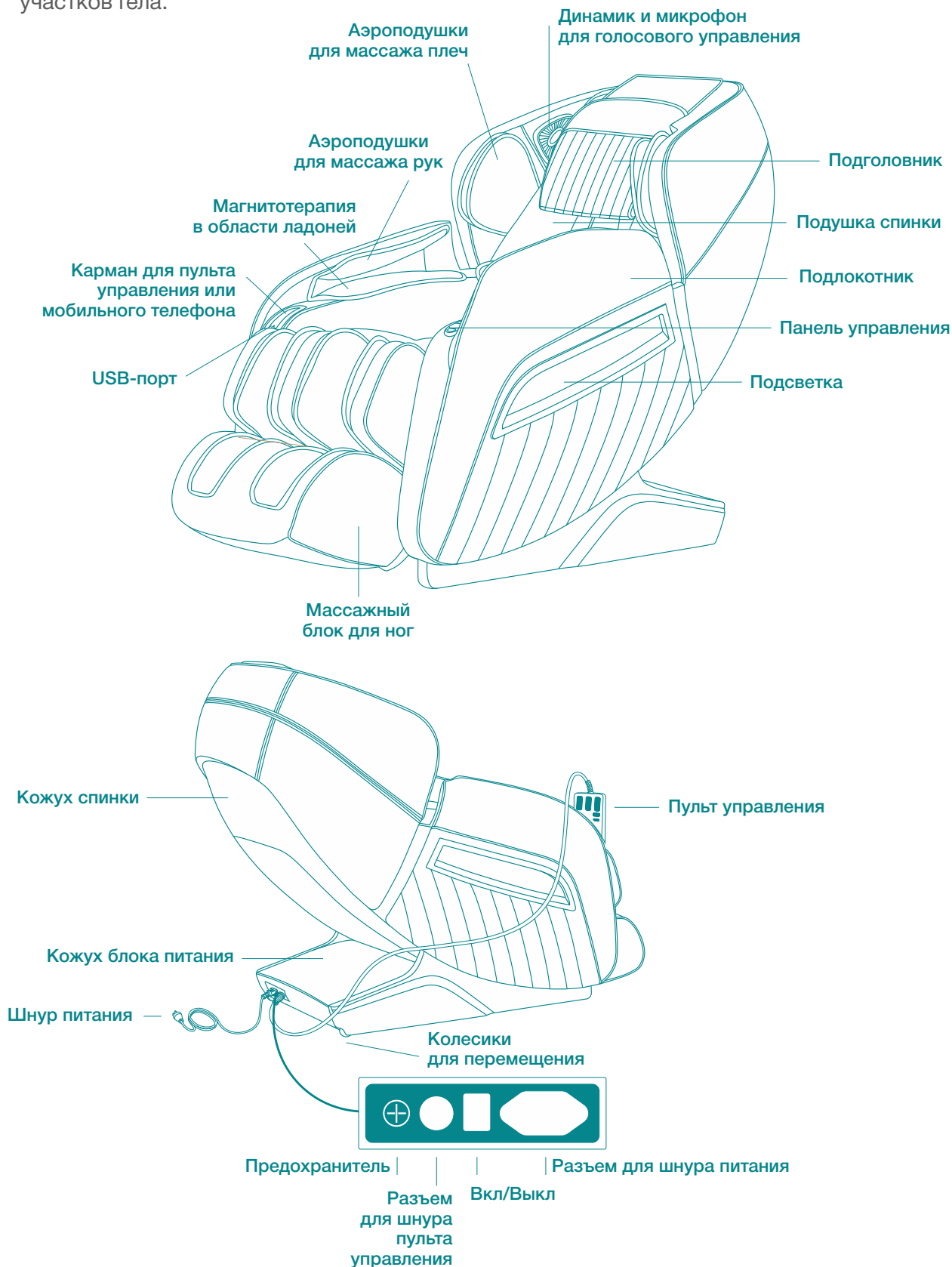


### Шаг 1

Аккуратно достаньте корпус массажного кресла, массажный блок для ног и остальные комплектующие из коробки. Кресло комплектуется набором для сборки. Проверьте комплектность.

### Шаг 2

Возьмите обеими руками массажный блок для ног, приставьте к корпусу массажного кресла. Плотно вставьте штекер шнура питания в соответствующий разъем из корпуса кресла, а воздушную трубку в сопло. Проверьте качество соединений. Убедитесь, что воздушная трубка и провод не скручены между собой и не пережаты.

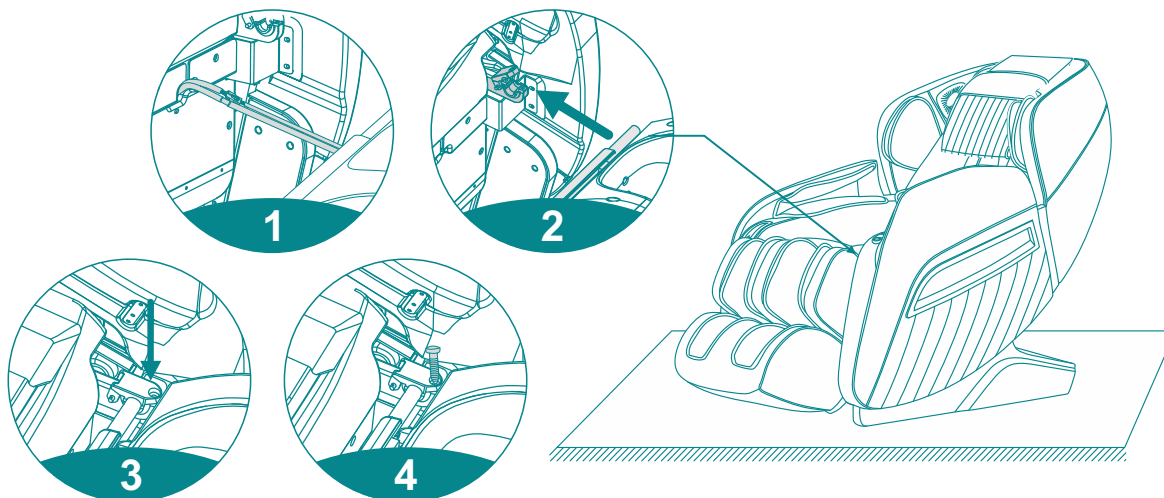

### Шаг 3

Поднимите массажный блок для ног и подсоедините его к корпусу массажного кресла, совместив ось с кронштейнами крепления, как показано на схеме. После того, как массажный блок для ног будет надежно установлен, опустите с левой и правой стороны специальный замок. Стяните замки винтами для фиксации соединения оси и кронштейна.

### Шаг 4

Подушка спинки соединяется со спинкой кресла молнией, а подголовник соединяется с подушкой спинки кресла застежкой. Если вы чувствуете, что массаж в области шеи и плеч недостаточно интенсивный, отстегните подголовник.



### Шаг 5

Вставьте штекер шнура пульта управления и штекер шнура питания в соответствующий разъем на корпусе блока питания сзади кресла. Вставьте вилку шнура питания в розетку.


Массажное кресло оборудовано колесиками в основании для перемещения.

Максимально поднимите спинку кресла.

Выключите массажное кресло переключателем «Вкл/Выкл» (в положение «О») в нижней части кресла. Достаньте вилку шнура питания из розетки и положите провода питания и пульта управления на сиденье во избежание повреждений.

Для перемещения кресла вам необходимо будет его сначала наклонить и поставить на колесики при помощи двух или более человек.

Поднимите переднюю часть кресла, как показано на рисунке. Удерживая его за верхнюю часть с центром тяжести на колесиках, переместите с помощью колесиков до места установки. Осторожно придайте креслу ровное положение.

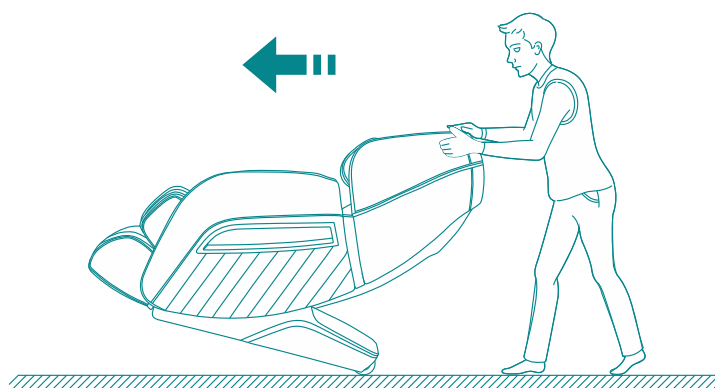

**ВНИМАНИЕ**

- Не перемещайте кресло с помощью колесиков на деревянной или другой поверхности, которую легко повредить. Для перемещения кресла вам необходимо его поднять с помощью трех или более человек, удерживая за основание в передней части и спинку в задней части.
- Не перемещайте кресло вместе с людьми, а также когда оно складывается или раскладывается.
- Не держитесь за подлокотники во время перемещения.
- Перед включением кресла убедитесь в отсутствии повреждений в шнуре электропитания и пульта управления.
- Убедитесь, что переключатель питания выключен (положение «О») перед подключением кресла к электросети.


Перед началом использования массажного кресла удостоверьтесь, что кресло установлено правильно на ровной поверхности и для его раскладывания имеется свободное пространство (не менее 15 см от стены или других предметов позади кресла и не менее 60 см впереди кресла).

Чтобы кресло не создавало помех в работе электроники, размещайте его на расстоянии не менее 1 метра от телевизора, радиоприемника и другой аудио/видео аппаратуры.

Рекомендуется устанавливать кресло на защитный коврик, чтобы избежать повреждения напольного покрытия



Перед использованием массажного кресла убедитесь, что имеется достаточно свободного места для его раскладывания. Удостоверьтесь, что рядом с креслом нет детей, домашних животных или посторонних предметов.

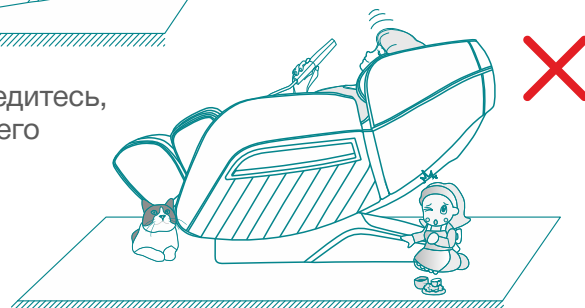

Включите питание массажного кресла, нажав на переключатель «Вкл/Выкл» в положение «I». Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» на пульте управления. С помощью пульта управления откиньте спинку кресла и поднимите массажный блок для ног, максимально разложив массажное кресло. Протестируйте работу всех функций массажного кресла и верните его в исходное положение или выберите необходимую программу массажа и ее длительность




### ВНИМАНИЕ

- Соблюдайте осторожность при раскладывании и складывании массажного блока для ног, следите за тем, чтобы он складывался правильно во избежание травм, повреждения материала покрытия или всего кресла.
- Избегайте попадания конечностей и прочих предметов между сиденьем и массажным блоком для ног, а также в пространства между механическими частями кресла во время его работы.
- Перед тем, как сесть в кресло, убедитесь, что массажный блок для ног максимально опущен и хорошо закреплен.
- Убедитесь, что кресло находится в исходном положении, в противном случае, для придания креслу исходного положения, выключите и включите питание.
- Не садитесь в кресло, если массажный блок для ног поднимается.
- Не оказывайте резких чрезмерных нагрузок на массажный блок для ног во избежание его повреждения.

После использования выключите кресло переключателем «Вкл/Выкл» (в положение «O») в нижней части кресла и извлеките вилку шнура питания из розетки.


Надлежащим образом храните массажное кресло, если не предполагается его использование в течение длительного времени.

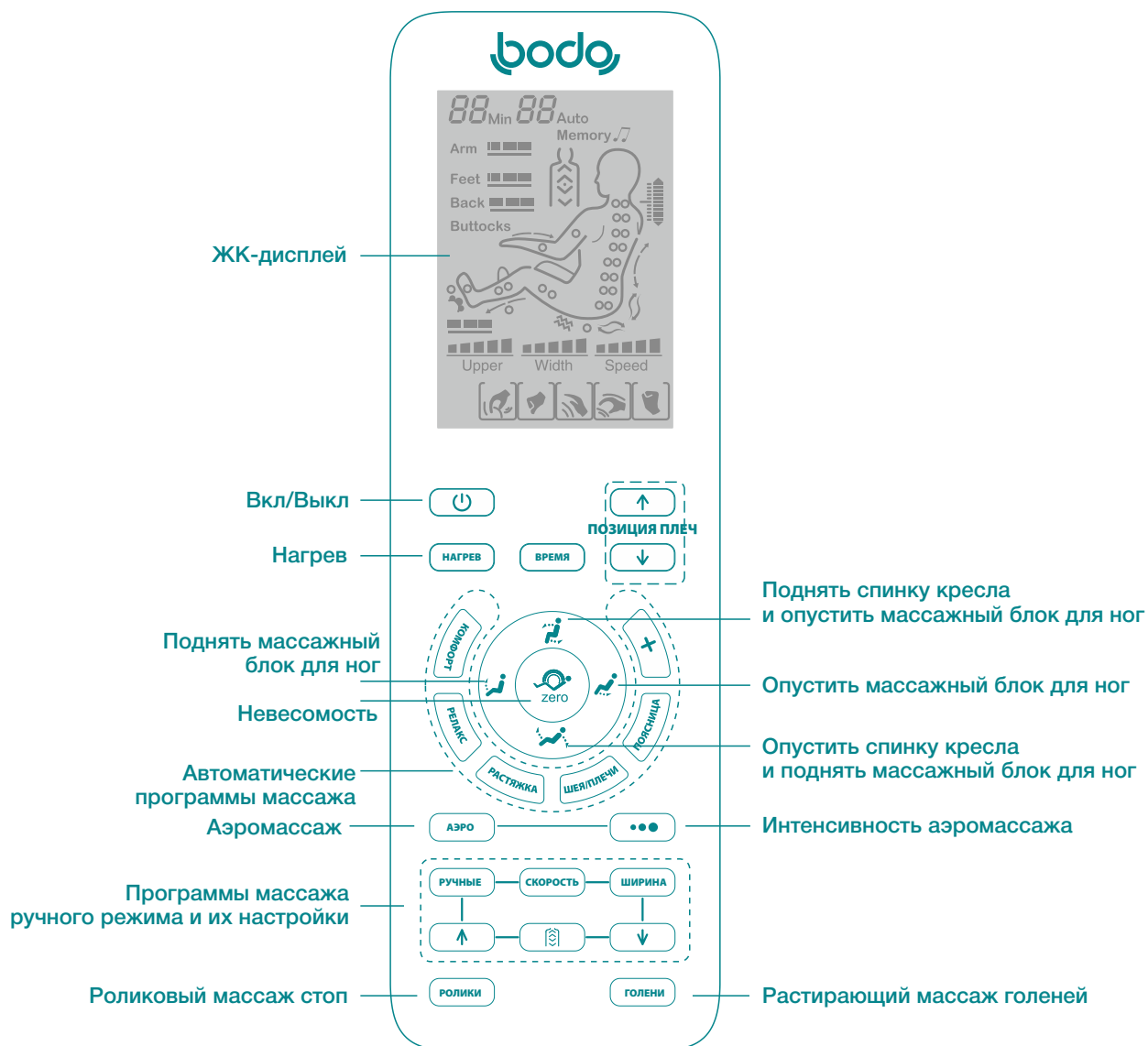

| Кнопка                                                                            | Описание                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Включает и выключает все функции массажного кресла |

Когда кресло подключено к электросети, нажмите на эту кнопку — включится ЖК-дисплей, кресло начнет автоматически раскладываться и сканировать тело для определения акупунктурных точек и позиции плеч. Дождитесь окончания сканирования. Если по окончании сканирования массажные ролики установились не на уровне плеч, вы можете в течение 10 секунд самостоятельно изменить и настроить их позицию с помощью кнопок «Позиция плеч». После регулировки и истечении 10 секунд начнется массаж

| Кнопка                                                                            | Описание                          | ЖК-дисплей                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Перемещает массажные ролики вверх |  |
|  | Перемещает массажные ролики вниз  |  |

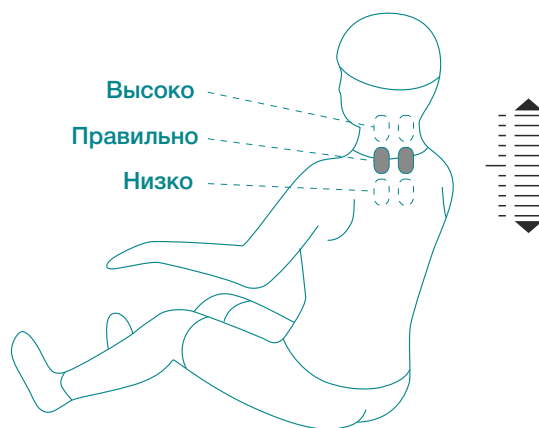

## Автоматические программы

| Кнопка                                                                              | Описание                                                                                     | ЖК-дисплей |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | Максимально комфортная программа для снятия напряжения и усталости во всем теле              | F1 Auto    |
|    | Глубокий расслабляющий массаж для снятия стресса                                             | F2 Auto    |
|    | Эффективно разминает и растягивает мышцы, расслабляя и снимая с них усталость                | F3 Auto    |
|    | Программа сосредоточена в области шеи и плеч, избавляет от ощущения скованности              | F4 Auto    |
|    | Специальная программа для нижней части спины, расслабляет мышцы после длительной работы сидя | F5 Auto    |
|  | Расслабляющий общий массаж тела с использованием различных разминающих техник                | A1 Auto    |
|                                                                                     | Программа для активного и глубокого разминания мышц шеи, плеч и спины                        | A2 Auto    |
|                                                                                     | Тонизирующий массаж, придает бодрость, заряжает энергией                                     | A3 Auto    |
|                                                                                     | Интенсивная программа, улучшает кровообращение, восстанавливает физически                    | A4 Auto    |
|                                                                                     | Программа сосредоточена в области бедер и ягодиц, помогает сохранить стройность фигуры       | A5 Auto    |
|                                                                                     | Расслабляющая программа массажа всего тела для улучшения качества отдыха или сна             | A6 Auto    |
|                                                                                     | Программа успокаивающего воздушно-компрессионного массажа, расслабляет тело и разум          | A7 Auto    |

### Программы массажа ручного режима

| Кнопка                                                                              | Описание                                                                                                                    | ЖК-дисплей                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| РУЧНЫЕ                                                                              | <b>Шиацу:</b> настраиваемые скорость массажа и ширина массажных роликов                                                     |             |
|                                                                                     | <b>Разминание:</b> настраиваемая скорость массажа                                                                           |             |
|                                                                                     | <b>Похлопывание:</b> настраиваемые скорость массажа и ширина массажных роликов                                              |             |
|                                                                                     | <b>Разминание с похлопыванием:</b> настраиваемая скорость массажа                                                           |             |
|                                                                                     | <b>Постукивание:</b> настраиваемые скорость массажа и ширина массажных роликов                                              |             |
| СКОРОСТЬ                                                                            | Выбор 1 из 5 уровней скорости массажа                                                                                       | <br>Speed   |
| ШИРИНА                                                                              | Выбор 1 из 3 уровней ширины массажных роликов                                                                               | <br>Width |
|  | Массаж в определенной точке                                                                                                 |           |
|                                                                                     | Массаж в определенной области                                                                                               |           |
|                                                                                     | Массаж всей спины                                                                                                           |           |
|  | Настройка области или точки для массажа.<br>Нажатие на соответствующую стрелку поднимает<br>или опускает массажный механизм |                                                                                                |
|  |                                                                                                                             |                                                                                                |

### Воздушно-компрессионный массаж

| Кнопка                                                                              | Описание                                       | ЖК-дисплей                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АЭРО                                                                                | Воздушно-компрессионный массаж рук и ног       | Arm <br>Feet  |
|                                                                                     | Воздушно-компрессионный массаж рук             | Arm                                                                                                |
|                                                                                     | Воздушно-компрессионный массаж ног             | Feet                                                                                               |
|  | Выбор 1 из 3 уровней интенсивности аэромассажа | Arm <br>Feet  |

## Другие функции


| Кнопка                                                                                                                                                                     | Описание                                                                                                                                                                         | ЖК-дисплей                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | Роликовый массаж стоп с 3 уровнями интенсивности                                                                                                                                 |  |
|                                                                                           | ИК-прогрев спины. Через 3 минуты после включения вы начнете ощущать комфортное тепло                                                                                             |  |
|                                                                                           | Изменяет длительность сеанса массажа. Каждое нажатие кнопки изменяет время на 5 минут. Максимальное время сеанса массажа 30 минут                                                | 88min                                                                               |
|                                                                                           | Запускает или останавливает растирающий массаж голеней                                                                                                                           |  |
| <br>     | Позволяют управлять углом наклона спинки кресла и массажного блока для ног. Нажмите на соответствующую кнопку, кресло начнет принимать горизонтальное или вертикальное положение |                                                                                     |
| <br> | Позволяют поднимать или опускать массажный блок для ног. Нажмите на соответствующую кнопку, массажный блок для ног начнет подниматься или опускаться                             |                                                                                     |
|                                                                                         | Раскладывает массажное кресло в 1 из 3-х позиций «нулевой гравитации»                                                                                                            |                                                                                     |

**Примечание:** «Нулевая гравитация» — это особый режим работы массажного кресла, при котором усиливается массажный эффект. Тело человека принимает максимально расслабленное положение — голова и ноги находятся практически на одном уровне, тело и ноги расположены под определенным углом, в таком положении нагрузка равномерно распределяется по всему телу и оно максимально расслаблено.

## Аудиосистема

Успешное *Bluetooth* сопряжение с мобильным телефоном или планшетом возможно с поддержкой функции *Bluetooth* в этих устройствах и под управлением операционной системы *Android* или *iOS*. После сканирования доступных *Bluetooth* устройств, необходимо выбрать из полученного списка в настройках вашего мобильного устройства сопряжение с массажным креслом (IMCM-XXXX). После успешного сопряжения вы сможете слушать свою любимую музыку во время массажа через динамики кресла.

| Кнопка                                                                            | Описание                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Включает и выключает все функции массажного кресла                                                                              |
|  | Нажмите, чтобы привести кресло в вертикальное положение<br>Поднимите клавишу, чтобы разложить кресло в горизонтальное положение |
|  | Раскладывает массажное кресло в 1 из 3-х позиций «нулевой гравитации»                                                           |
|  | Нажмите, чтобы опустить массажный блок для ног<br>Поднимите клавишу, чтобы поднять массажный блок для ног                       |
| AUTO                                                                              | Нажмите и выберите 1 из 12 автоматических программ массажа                                                                      |

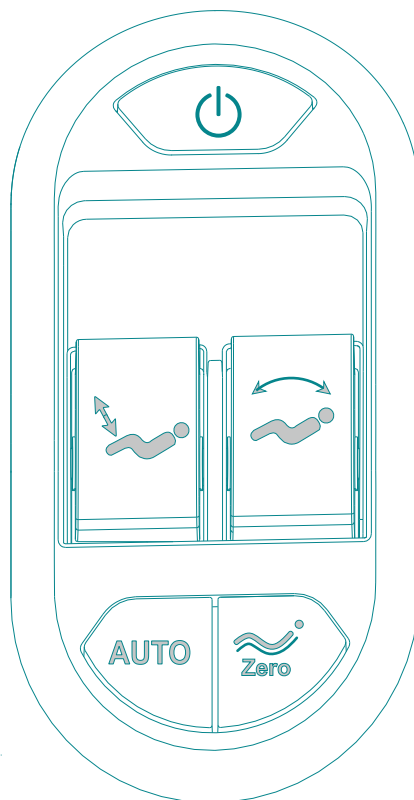

Когда массажное кресло включено и находится в режиме ожидания, произнесите фразу «Hi Alice», чтобы активировать голосовое управление. Услышанное в ответ: «I am here» будет означать, что функция голосового управления и распознавания речевых команд активирована, кресло готово принимать команды голосом в течение 6 секунд. Голосовые команды произносятся на английском языке, произносите команды четко и без ошибок. Если в течение 6 секунд не прозвучит голосовая команда, функция голосового управления автоматически отключится, и ее необходимо повторно активировать.

Каждой голосовой команде пользователя соответствует голосовой ответ от кресла о статусе выполнения команды.

| Голосовая команда         | Голосовой ответ               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Massage on                | OK, massage on                |
| Massage close             | OK, massage close             |
| Comfort Massage           | OK, comfort massage           |
| Relax massage             | OK, relax massage             |
| Full body massage         | OK, full body massage         |
| Neck and shoulder massage | OK, neck and shoulder massage |
| Back and waist massage    | OK, back and waist massage    |
| Stretch massage           | OK, stretch massage           |
| Fixed massage             | OK, fixed massage             |
| Change the other mode     | OK, change the other mode     |
| Go little down            | OK, go little down            |
| Go little up              | OK, go little up              |
| Open the air pressure     | OK, open the air pressure     |
| Close the air pressure    | OK, close the air pressure    |
| Up the seat position      | OK, up the seat position      |
| Down the seat position    | OK, down the seat position    |
| Stop adjustment           | OK, stop adjustment           |

### Чистка

Перед чисткой массажного кресла убедитесь, что оно выключено, и вилка шнура питания отсоединена от розетки. Никогда не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания воды в устройство.

- Смочите мягкую ткань в растворе нейтрального моющего средства, хорошо отожмите и очистите заднюю часть спинки кресла, подлокотники, массажный блок для ног, воздуховоды и другие пластиковые детали. Затем протрите все сухой хлопчатобумажной тканью.
- Очистите пульт управления, провода и корпус блока питания мягкой сухой тканью.
- Смочите мягкую ткань в растворе нейтрального моющего средства, хорошо отожмите и очистите подголовник, подушку спинки кресла, подушку сиденья. Затем вытрите все сухой хлопчатобумажной тканью и дайте креслу высохнуть в хорошо проветриваемом помещении.



#### ВНИМАНИЕ

- При чистке запрещено использовать ярко окрашенные цветные ткани, металлические губки, а также любые моющие средства, включая агрессивные, такие как бензин, растворители или спирт. Данные материалы и вещества могут изменить цвет поверхности массажного кресла и повредить его.
- Запрещено использовать фен для сушки и утюг для обивки кресла!

### Хранение

- Выключите массажное кресло и отсоедините шнур питания от электросети. Рекомендуется хранить устройство в чистом, сухом, прохладном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.
- Если не предполагается использование массажного кресла в течение длительного времени, закройте его защитным чехлом (не входит в комплект поставки).
- Не кладите тяжелые предметы на массажное кресло.
- Срок хранения — не ограничен.

### НАПОМИНАНИЕ:

Перед каждым использованием массажного кресла, убедитесь что:

- ✓ отсутствуют посторонние запахи (например, жженой резины или проводки)
- ✓ питание подается на все детали кресла
- ✓ не нагревается шнур питания
- ✓ отсутствуют другие нетипичные признаки



#### ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, при наличии любого из вышеперечисленных признаков прекратите использование массажного кресла, чтобы избежать его повреждения или несчастных случаев. Выключите массажное кресло и отсоедините шнур питания от электросети. Обратитесь в сервисную службу компании-продавца для технического обслуживания или ремонта.

В данном разделе описаны самые распространенные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при использовании массажного кресла. Если вы не сможете устранить проблему, используя нижеизложенную информацию, или у вас имеются проблемы, которые здесь не описаны, обратитесь в сервисную службу.

| Неисправность                                                             | Возможная причина                                                                                                | Способ устранения                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Кресло не включается                                                      | Вилка шнура питания не вставлена в розетку                                                                       | Вставьте вилку шнура питания в розетку. Проверьте все контакты.                         |
|                                                                           | Не включен переключатель «Вкл/Выкл»                                                                              | Нажмите на переключатель «Вкл/Выкл» (в положение «I»)                                   |
| Массаж внезапно прекратился                                               | Произошло отключение электропитания                                                                              | Возобновите подачу электроэнергии                                                       |
|                                                                           | Закончилось время программы массажа                                                                              | Выключите питание и подождите 30 минут до следующего запуска                            |
| Массажное кресло сильно нагревается                                       | Слишком долгая непрерывная работа кресла                                                                         | Выключите питание и подождите 60 минут до следующего запуска                            |
| Во время работы раздаются звуки и шумы из конструкции кресла              | Это может быть звук мотора, компрессора, механических частей кресла или звук трения массажного ролика о покрытие | Это нормальная работа кресла, не является неисправностью                                |
| Отсутствует звук из динамиков                                             | Уровень громкости звука установлен на минимальном значении                                                       | Увеличьте уровень громкости звука                                                       |
| Массажный блок для ног или спинка кресла не поднимается или не опускается | Имеются помехи и препятствия при складывании или раскладывании кресла                                            | Устраните препятствия и чрезмерное давление на спинку кресла или массажный блок для ног |
|                                                                           | Массажный блок для ног или спинка кресла перегружены                                                             |                                                                                         |

## УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА

Данный продукт нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами! Все электрические или электронные устройства, независимо от того, содержат они токсичные вещества или нет, должны быть утилизированы отдельно в специальном пункте утилизации согласно экологическим нормам и правилам вашего региона. За дополнительной информацией по правильной утилизации обращайтесь в органы местного самоуправления или к дилеру. За неправильную утилизацию данных отходов в соответствии с национальным законодательством может быть назначен штраф.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование продукта - массажное кресло

Название модели - Bodo Ecto Sport

Напряжение - AC220-240V/50-60Hz

Мощность - 150W

Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажного кресла «Bodo» дилером в течение 3-х лет со дня продажи изделия.

Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых гарантий и действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающих факт совершения покупки. Гарантия действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие. На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии. Гарантия не распространяется на повреждения и износ обивки кресла.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, дилер оставляет за собой право заменить массажное кресло на новое, адекватное по стоимости неисправному массажному креслу на дату приобретения.

Гарантия прекращает свое действие, если ремонт массажного кресла производился кем-либо, кроме дилера или уполномоченного агента.

В случае необходимости доставки кресла в сервисный центр, расходы по транспортировке оплачивает владелец массажного кресла.

При эксплуатации изделия на коммерческой основе или при общественном использовании, срок гарантии сокращается до 1 (одного) года.

### **Гарантийное обслуживание не производится в случаях:**

- небрежного хранения или транспортировки
- нарушения правил эксплуатации
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми
- использования изделия не по назначению
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних предметов

Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляется за счет клиента.

Дата покупки: \_\_\_\_\_  
Наименование товара: \_\_\_\_\_  
Компания-продавец: \_\_\_\_\_  
Адрес продавца: \_\_\_\_\_  
Телефон продавца: \_\_\_\_\_  
ФИО клиента: \_\_\_\_\_

М.П.

Подпись \_\_\_\_\_

С правилами эксплуатации, противопоказаниями и рекомендациями ознакомлен.  
Претензий не имею.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка)